












Liste der verwendeten Symbole





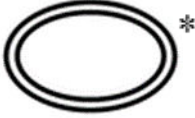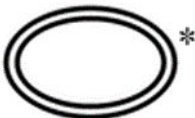



Stand: 08/2023

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	3082	Hersteller	Zeigt den Hersteller des Medizinprodukts an.
	aus ISO 15223-1	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft/ Europäischen Union	Zeigt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union an.
	über Swissmedic.ch	Bevollmächtigter in CH	Zeigt den Bevollmächtigten für die Schweiz an.
	2497	Herstellungsdatum	Zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde.
	2607	Verwendbar bis	Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.
	2492	Chargenbezeichnung	Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
	2493	Katalognummer	Zeigt die Katalognummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	3725	Importeur	Zeigt das Unternehmen an, welches das Medizinprodukt am Ort einführt bzw. eingeführt hat.






DK 021 Liste der verwendeten Symbole

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	3724	Vertriebspartner	Zeigt das Unternehmen an, welches das Medizinprodukt am Ort vertreibt.
	aus ISO 15223-1	Medical Device	zeigt an, dass es sich bei dem betreffenden Gegenstand um ein Medizinprodukt handelt.
	2501	Sterilisiert mit Ethylenoxid	Zeigt ein Medizinprodukt an, das mit Ethylenoxid sterilisiert wurde.
	2503	Dampf oder trockene Hitze sterilisiert	Zeigt ein Medizinprodukt an, das mit Dampf oder trockener Hitze sterilisiert wurde.
	3707	Einfaches Sterilbarriersystem	Zeigt ein Einfaches-Sterilbarriersystem an.
	3704	Doppeltes Sterilbarriersystem	Zeigt zwei Sterilbarriersysteme an.
	3708	Einfaches Sterilbarriersystem mit innenliegender Schutzverpackung	Zeigt ein Einfaches-Sterilbarriersystem mit innenliegender Schutzverpackung an.
	3709	Einfaches-Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung	Zeigt ein Einfaches-Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung an
	* Eine durchgezogene Linie kennzeichnet ein steriles Barrierematerial.		
	*Eine gestrichelte Linie kennzeichnet eine Verpackungsschicht ohne validierten mikrobiellen Schutz.		


DK 021 Liste der verwendeten Symbole

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	*Alle Symbole zur Indikation des genutzten Sterilbarrieresystems müssen stets neben folgendem Symbol stehen.		
	2608	Nicht erneut sterilisieren	Zeigt ein Medizinprodukt an, das nicht erneut sterilisiert werden darf.
	2609	Unsteril	Zeigt ein Medizinprodukt, das keinem Sterilisationsverfahren ausgesetzt wurde.
	2606	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten	Zeigt an, dass das betreffende Medizinprodukt nicht verwendet werden sollte, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde, und dass der Anwender die Gebrauchsanweisung lesen sollte, um zusätzliche Informationen zu erhalten.
	0624	Von Sonnenlicht schützen	Zeigt ein Medizinprodukt an, das vor Lichtquellen geschützt werden muss
	0626	Trocken aufbewahren	Zeigt ein Medizinprodukt an, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss
	0632	Temperaturgrenzwerte	Zeigt die Temperaturgrenzwerte an, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann
	1051	Nicht wiederverwenden	Zeigt ein Medizinprodukt an, das nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen ist

DK 021 Liste der verwendeten Symbole

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	1641	Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten	Zeigt dem Anwender an, dass es notwendig ist, die Gebrauchsanweisung zu beachten.
	abgeleitet von 2725	Enthält oder Anwesenheit von Naturkautschuklatex	Zeigt die Anwesenheit von Naturkautschuk oder trockenem Naturkautschuklatex als einen Konstruktionswerkstoff im Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinproduktes an.
	aus prEN 15986	Enthält oder Anwesenheit von Phthalate	Zeigt die Anwesenheit von einem oder mehreren Phthalaten als einen Konstruktionswerkstoff im Medizinprodukt oder der Verpackung eines Medizinproduktes an.
	aus Verordnung (EU) 2017/745 bzw. aus Richtlinie 93/42/EWG	CE-Kennzeichnung	Gibt an, dass das Produkt den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 bzw. der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte entspricht; xxxx gibt die Kennnummer der zuständigen Benannten Stelle an.
	0434A	Achtung	Zeigt an, dass nahe der Stelle, an der das Symbol angebracht wurde, Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät oder der Steuerung notwendig ist, oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit der Bedienungsperson oder einen Eingriff durch die Bedienungsperson verlangt, um unerwünschte Folgen zu vermeiden

DK 021 Liste der verwendeten Symbole

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	aus ISO 15223-1	Eindeutige Produktidentifizierung	Zeigt einen Träger an, der Informationen zu einer eindeutigen Produktidentifizierung (UDI) enthält.

Änderungshistorie

Revision	Datum	Erstellt	Änderungsinhalt
1	01.07.2021	Anke Brenner	Ergänzung von Symbolen zu den Sterilbarriersystemen und dem Importeur.
2	05.05.2022	N. Froitzheim	Ergänzung von Symbolen zu den Sterilbarriersystemen, UDI, Vertriebspartner. Zudem Anpassung der Symbolbeschreibungen in einigen Fällen an DIN EN ISO 15223-1: 2022-02.
3	08.08.2023	A. Klauke	Ergänzung des Symbols zum Schweizer Bevollmächtigten; Ergänzung der ISO 15223-1 als Quelle für das MD- und UDI-Symbol